

TANITA®
Monitoring Your Health


INSTRUKCJA OBSŁUGI

HD-351



Nazwa części

1. Należy otworzyć miejsce na baterie, znajdujące się na spodzie wagi i włożyć baterie.

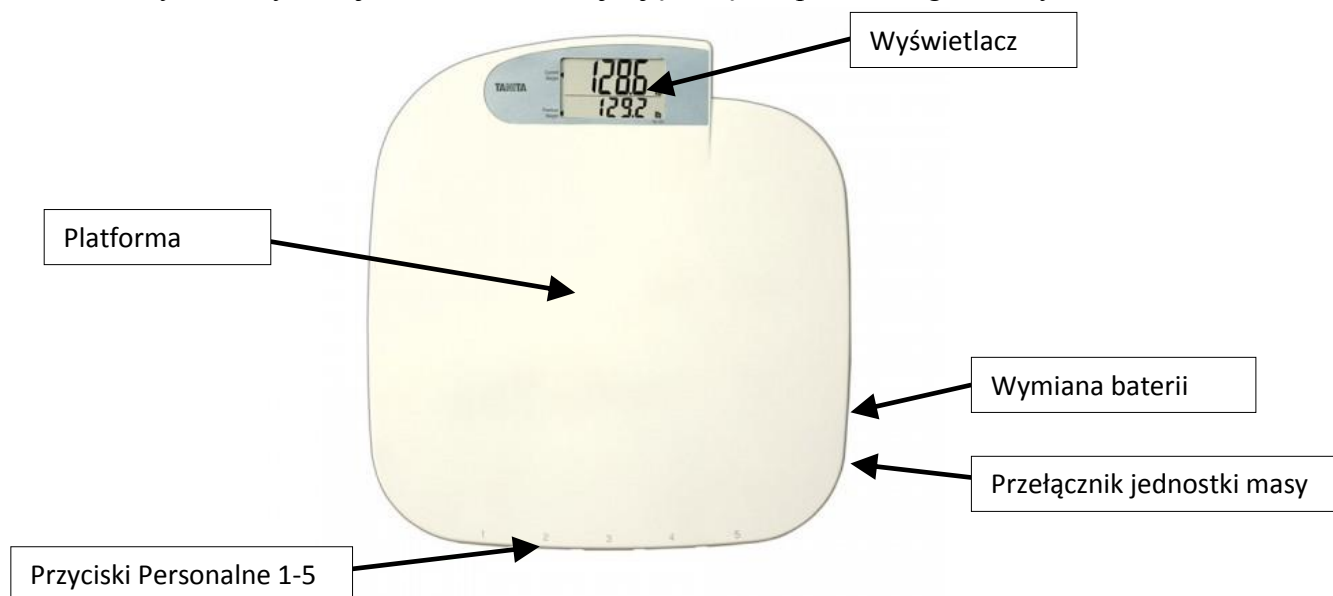

Warunki korzystania


Opis

- Zapamiętuje ostatni pomiar.
- Cyfrowa dokładność i niezawodność.
- Klasyczna prostota, pasuje do każdego wnętrza.
- Trwała konstrukcja, powierzchnia antypoślizgowa.
- Wskaźnik "Lo" pojawia się, kiedy baterie wymagają wymiany.

Przed użyciem

Wybierz preferowany tryb wagi (funty, kg, lub ul. lb) przy użyciu przycisku Mode Switch. Umieszczenie wagi. Waga powinna być używana na twardej powierzchni w celu otrzymania dokładniejszych pomiarów. Nie zaleca się stosowania na powierzchniach z dywanami.

Instrukcja użytkowania

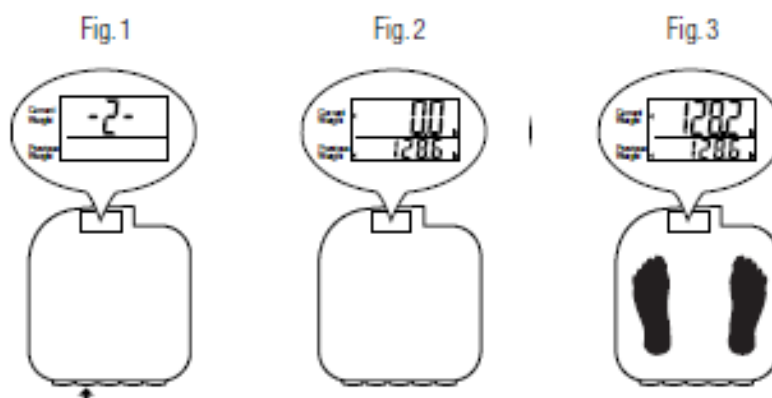

Wagę uruchamia się wciskając palcem u nogi przycisk (1-5 przyciski można przypisać do danej osoby). Na wyświetlaczu pojawi się numer osobisty (rys.1).Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się, "0.0" (rys. 2), a następnie wejdź na wagę (rys. 3). Obecna masa pojawi się w górnej części wyświetlacza, a z poprzedniego pomiaru w dolnej części wyświetlacza.



Uwaga:

- Komunikat "OL" pojawi się na wyświetlaczu, gdy skala zdolności pomiarowej wagi jest przekroczona.
- "0.0" zniknie, jeśli nie wejdzie się na wagę w ciągu 60 sekund.
- Urządzenie wyłączy się jeśli naciśniesz klawisz 5 (wyjątek: podczas pomiaru nie można wyłączyć wagi).

Środki ostrożności

Ponowna kalibracja wagi , delikatnie nacisnąć Personal Key (patrz rys. 4). Nie należy umieszczać ręki na platformie wagi podczas ponownego przeliczenia (patrz rys.5). Komunikaty "-0.2" lub "-0,4" oznaczają że podczas kalibracji na wadze było coś położone. Należy wagę ponownie skalibrować. Jeżeli kalibracja przebiegła pomyślnie naciśnij klawisz personalny by ponownie skorzystać z wagi, wyświetli się komunikat "0,0" oznaczający gotowość wagi do pomiaru..

Eksploatacja i konserwacja

- Nie należy otwierać obudowy wagi i ruszać jej mechanizmów (Może skutkować to utrata gwarancji)
- Wagi nie należy umieszczać w pobliżu urządzeń grzejnych, w miejscu o wysokiej wilgotności lub ekstremalnych zmianach temperatury.
- Nigdy nie zanurzać wagi w wodzie i unikać wycieku płynów chemicznych na wagę. Do czyszczenia używać tylko wilgotnej ściereczki i delikatnego detergentu.

- Unikać silnych uderzeń lub silnych wibracji urządzenia.
- Nie należy stawiać na wadze gdy jej powierzchnia jest mokra.
- Używanie wagi w pobliżu silnych urządzeń transmisyjnych(np. telefonów komórkowych) gdyż mogą wpłynąć na dokładność pomiaru.
- W przypadku nie używania wagi przez dłuższy czas należy wyjąć baterie
- Podczas przenoszenia wagi musi być ona wyłączona

Specyfikacja

Pojemność maksymalna: 200 kg

Stopniowanie: 0,1 kg

Zasilanie: 4 baterie AA (UM-3), DC 6V

Pobór mocy: maksymalnie 60 mA

Masa może być wyświetlana w takich jednostkach jak lb lub kg, lub ul. funtów